

新冠病毒 快速抗原測試 常見問題



**NORTH EAST
MEDICAL SERVICES**
東北醫療中心

a california *health+* center

◆ 誰可以使用家庭式抗原測試？

此家庭式測試被美國食品藥物管理局 (FDA) 緊急授權用於14歲或以上人士（2歲或以上兒童由成人代為）於家中自行收集鼻腔拭子樣本。2歲以下孩童建議使用核酸檢測。

此測試由美國衛生資源與服務管理局 (HRSA) 通過東北醫療中心向社區免費分發，以確保並擴展社區中免費且無障礙的新冠檢測。此測試無授權轉售。

◆ 如果我的測試結果呈陽性應該怎麼做？

- * 把您的陽性測試結果拍照作為記錄，並向您的醫生展示。
- * 聯繫您的醫生/醫護師，討論隔離程序和適用的治療¹。
- * 東北藥房可以為住院風險增加的病人提供新冠肺炎抗病毒藥物。
- * 通知與您接觸的親密接觸者。

1. 尤其如果您有症狀並且超過65歲或患有慢性疾病。

◆ 如果我的測試結果呈陰性應該怎麼做？

- * 如果您繼續出現類似新冠病毒的症狀：**1)** 重複抗原測試或尋求分子/核酸檢測以確定陰性的測試結果，並且**2)** 與您的醫生跟進。
- * 如果您可能或已知接觸新冠病毒後並無症狀，考慮重複抗原測試或尋求分子/核酸檢測（接觸病毒後3-7天進行檢測最為理想）。

◆ 我何時該使用家庭式抗原測試？

如果您出現類似新冠病毒症狀：

- * 發燒或發冷
- * 咳嗽
- * 呼吸短促或困難
- * 疲倦
- * 肌肉或身體疼痛
- * 頭痛
- * 新的味覺或嗅覺喪失
- * 喉嚨痛
- * 鼻塞或流鼻水
- * 噁心或嘔吐
- * 腹瀉

如果您可能或已知接觸過新冠病毒。

如果您需要為上學、工作、旅遊、活動需要、或在與體質脆弱的人士會面前進行新冠檢測。




如何使用

QuickVue 家庭式


新冠病毒測試

第一步

開始測試前請先
洗手或使用免洗
消毒液清潔雙手。

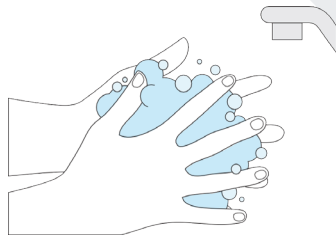

檢查測試套裝並準備一個衛生的地方放置所有組件。
準備好鐘錶或計時器會更有幫助。

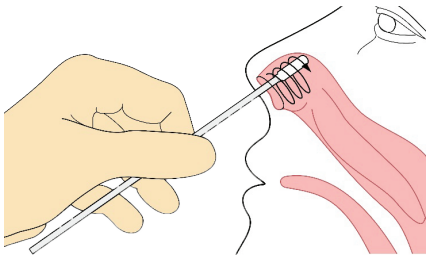


第二步

把鼻腔拭子插入鼻腔 1/2 至 3/4 英寸深處。將拭子緊貼鼻腔內部
旋轉擦拭至少 4 次。使用同一支鼻腔拭子在另一邊的鼻腔重複
同樣的步驟。為避免樣本污染，請勿將鼻腔拭子接觸鼻腔內部以外的
任何地方。

第三步

取出鼻腔拭子並將其放入樣本採集試
管底部的液體中。把拭子攪拌
3 至 4 次並留在試管裡至少 1 分鐘，
但不超過 10 分鐘。

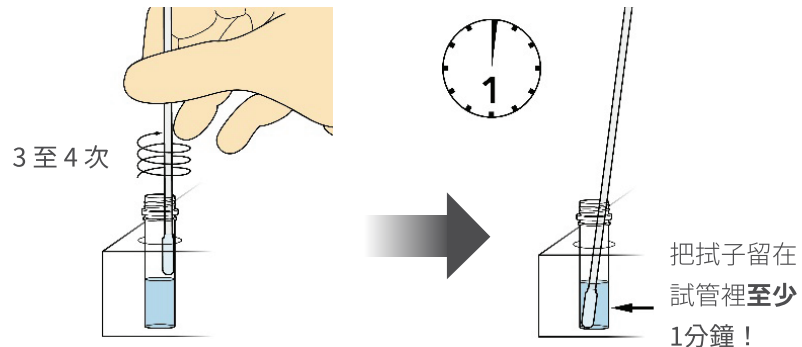


第四步

取出拭子並將試紙放入試管
中，箭頭朝下，放置至少
10 分鐘，但不超過 15 分鐘。




把試紙留在
試管裡至少
10分鐘！

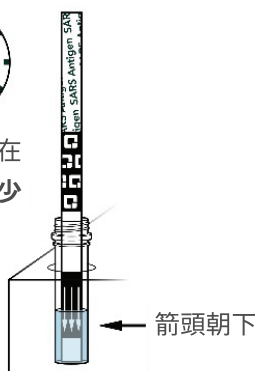

第五步

從試管中取出試紙並將其放置在測試框上查看結果。試紙上的測試結
果在 15 分鐘後將失效。呈陽性的測試結果必須顯示一條藍色的線及一
條粉紅色的線（在藍線下方）就算您看到一條很淺的粉紅色線，這也
是呈陽性的測試結果。呈陰性的測試結果僅顯示一條藍線。


測試結果呈陽性

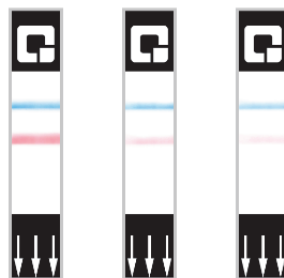

測試結果呈陰性



測試結果無效

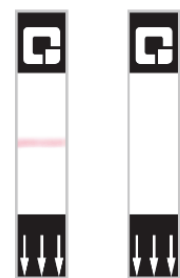

掃描二維碼
了解詳情！

資料來源: Quidel QuickVue 家庭式新冠病毒測試使用指南。
<https://quickvueathome.com/>